



hyaluvisk drops

STERILE A

NON-INJECTABLE

Hydrating and lubricating solution, sterile, free from preservatives. Box of 20 x 0,5 ml multidose reclosable units in sachets.

COMPOSITION

Sodium hyaluronate 0,4%, dibasic sodium phosphate, monobasic sodium phosphate, sodium chloride, water for injections.

INDICATIONS


- Hyaluvisk drops is indicated in cases of eye dryness sensation when natural tear production is insufficient.
- Hyaluvisk drops plays an essential role in providing a stable and soft coating on the eye surface, which is maintained even with blinking. Hyaluvisk drops guarantees long lasting relief with maximum comfort.
- Hyaluvisk drops can be used for lubricating the eyes when the lids are not closed during general anaesthesia.

HOW DOES HYALUVISK DROPS WORK?

Hyaluvisk drops contain high molecular sodium hyaluronate, a natural polymer which is also present in eye tissues. Its water retention capacity plays an essential role in maintaining a film of tears. Its balanced formulation allows its pH and osmolarity to be adjusted to values similar to those of tears, and gives the product an irrigating, refreshing and soothing effect on sensitive eyes. The preservative-free formulation enhances the eye's excellent long-term tolerance, allowing regular, daily use.

HOW DO I USE HYALUVISK DROPS?

Dosing: place 1 or 2 drops into the conjunctival sac of the eye.

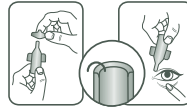

Reclosable - Smooth tip for increased safety

Wash your hands thoroughly before using the solution. Tear off one multi-use container from the strip, then twist its top to open. Avoid touching the eyelid or eye surface with the container tip. The vial can be reclosed and once opened each vial can be used for up to 12 hours.

PRECAUTIONS

- Before use, make sure that the multi-use container is not damaged.
- Do not touch the eyelid or eye surface with the container tip.
- Once opened, each vial can be used for up to 12 hours.
- Does not contain any preservative.
- Do not use after the expiry date indicated on the package.
- Store below 25°C.
- After opening of the sachet, keep the multidose units safe from the light.
- Keep out of the reach of children.
- In case of concomitant treatment, do not apply Hyaluvisk drops at the same time as other eye drops.
- If discomfort persists while using Hyaluvisk drops or reappears after discontinuation of treatment consult your doctor.



NTC srl, 20124 Milaan, Italie

Distributed by: ID PHAR, Iddergemse Steenweg 77, BE-9450 Haaltert

Le Hyaluvisk drops is a classe IS medical device

Date of the first EC certificate: September 2011

Revision: April 2011

CE 0426



hyaluvisk drops

STERILE A

NICHT-INJIZIERBAR

Lubrifizierende Augentropfen, steril und ohne Konservierungsmittel. Packung mit 20 x 0,5 ml wieder verschließbaren Kapseln, verpackt in Beuteln.

ZUSAMMENSETZUNG

Natriumhyaluronat 0,4%, dibasisches Natriumphosphat, monobasisches Natriumphosphat, Natriumchlorid und Wasser zu Injektionszwecken

ANWENDUNGSGEBIETE


- Hyaluvisk drops eignen sich auf Grund ihrer einzigartigen Zusammensetzung zur Augenpflege mit langanhaltender Pflegewirkung.
- Hyaluvisk drops bilden einen stabilen und sanften Schutzfilm auf der Augenoberfläche, der nicht durch Blinzeln eliminiert wird. Dadurch garantieren Hyaluvisk drops maximalen Komfort.
- Hyaluvisk drops eignen sich speziell für Rassen mit zuchtbedingten Augenlidveränderungen.

WAS MACHT DIE HYALUDROPS SO BESONDERS?

Hyaluvisk drops enthalten hochwertiges molekulares Natrium-Hyaluronat, ein natürliches Polymer, das auch im Augengewebe vorkommt. Hyaluronsäure spielt eine wesentliche Rolle in der Erhaltung des Tränenfilms. Hyaluvisk drops sind dem pH-Wert und der Osmolarität der Tränenflüssigkeit des Auges angepasst. Hyaluvisk drops enthalten keine Konservierungsstoffe, sind damit besonders für empfindliche Tiere geeignet und können täglich angewendet werden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Dosierung: 1 oder 2 Tropfen in das Auge geben.

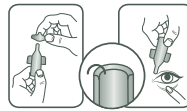

Verschließbar - Glatte Tülle für mehr Sicherheit

Vor der Anwendung der Lösung Hände sorgfältig waschen. Trennen Sie eine Kapsel vom Riegel ab und drehen Sie den oberen Teil auf, Augenlid oder Augenoberfläche nicht mit der Spitze des Behältnisses berühren. Hyaluvisk drops können bis zu 12 Std. nach Öffnen der Kapsel verwendet werden.

HINWEISE

- Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Behältnisses vor der Anwendung.
- Augenlid oder Augenoberfläche nicht mit der Spitze des Behältnisses berühren.
- Hyaluvisk drops können bis zu 12 Std. nach Öffnen der Kapsel verwendet werden.
- Ohne Konservierungsmittel.
- Nach Ablauf des auf der Verpackung angegebenen Mindesthaltbarkeitsdatum nicht mehr anwenden.
- Do not use after the expiry date indicated on the package.
- Nicht über 25°C lagern.
- Nach dem Öffnen des Beutels, Kapseln vor Licht geschützt aufbewahren.
- Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
- Hyaluvisk drops nicht gleichzeitig mit anderen Augentropfen anwenden, wenn Sie ebenfalls eine andere Behandlung anwenden.
- Wenn das Unwohlsein während der Anwendung von Hyaluvisk drops andauert oder nach dem Ende der Behandlung wieder auftritt konsultieren Sie Ihren Arzt.



NTC srl, 20124 Milan, Italien

Vertrieben durch: ID PHAR, Iddergemse Steenweg 77, BE-9450 Haaltert

Hyaluvisk drops ist ein Medizinprodukt der Klasse IS

Datum der ersten CE-Zertifizierung: September 2011

Letzte Überarbeitung: April 2011

CE 0426



1107D02

